

信頼される安心を、社会へ。

SECOM

「もう一度、声が欲しい」
その気持ちにセコムがお応えしました。

マイボイス



独自の電動式人工喉頭 セコム「マイボイス」

「マイボイス」の特長



抑揚付き発声とフラットな発声の使い分けが可能

マイボイスは、2つのボタンの使い分けによって抑揚のついた発声とフラットな発声を使い分けることができます。はじめはフラットな発声で基本的な技術を習得し、上達してきたら、抑揚がついた自然なイントネーションでの会話やスピーチを楽しむといった使い方ができます。



《高音タイプもあります》

マイボイスは、中高年男性の声に近い音を出すように設定されていますが、お好みに応じて80~100Hz高い声を出せるタイプもご用意していますので、女性や若年者の方も自然な発声ができます。

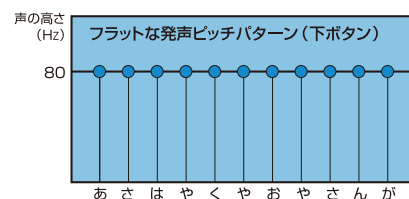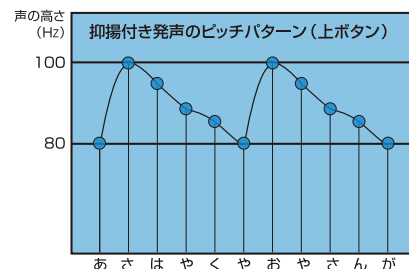

外出時でも安心な省電力設計

発声ボタンとは別に電源ボタンがある設計ではないため、発声ボタンを押しながら使用している間だけ電力を消費します。このため不必要な電力消費量が少なく、電源ボタンの切り忘れを気にする必要もありません。また、付属の充電式電池だけでなく市販のアルカリ角型電池も使用できるので、不意の電池切れの際も安心です。

助成制度

電動式人工喉頭は自治体からの交付（助成金）を受けられる制度があります。詳しくは、各自治体の福祉窓口へご相談ください。

握りやすい設計です

電動式人工喉頭は長時間使う場合もあるので握りやすさも重要です。マイボイスは、胸の下部の薬指と小指が当たる部分がやや扁平になるように設計していますので、握りやすくなっています。

故障時の対応も安心

保証期間は商品発送日より本体は3年間、充電器は1年間です（付属の充電式電池は対象外です）。

製品名	マイボイス
寸法	直径（最大）34mm、長さ135mm
質量	110g（電池を除く）
連続使用可能時間	充電式ニッケル水素電池：約1~2時間（満充電時）／市販アルカリ角型9V乾電池（006P・充電不可）も使用可能。
付属品	充電器：1個、充電式ニッケル水素電池：2個、ソフトケース：1個
ボタンの使い分け	抑揚付き発声（上ボタン）、フラット発声（下ボタン）を使い分けます。

※本機は、磁気の強い製品です。ペースメーカーなどの磁気の影響を受けやすい機器・製品とは十分な距離において使用・携行してください

信頼される安心を、社会へ。

SECOM

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1
<http://www.secom.co.jp>

販売元：センシンメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3

フリーダイヤル：☎0120-731008 FAX:03-5802-0562

メールアドレス：elarynx@cap.ocn.ne.jp

<http://www.senshin-medical.co.jp/elarynx/>

販売店

