

vol.11


センシン枕カタログ



目次

- 4P [仰臥位用枕] アネスピロ2
- 5p [仰臥位・側臥位用枕] シフォン円座型・円柱型／ピロカバー
- 6P [腹臥位用枕] アネプロン・アネプロン小児用・アネプロン低反発型
- 7P アネプロン用鏡付き台座
- 8P [側臥位用枕] SASUKE ／ [仰臥位・側臥位用枕] センシंपロ
- 9P [RAMP体位用] ランポー
- 10P [側臥位用腋窩枕] 腋窩まもロール
- 11P [容量可変式水枕] ウォーターピロ
- 12P 神経ブロック用クッション
- 13P [内視鏡検査・治療用枕] エンドピロー・今治まくら
- 14P 特注・カスタマイズについて
- 15P [陰圧式固定具] マジックベッド・マジックギブス



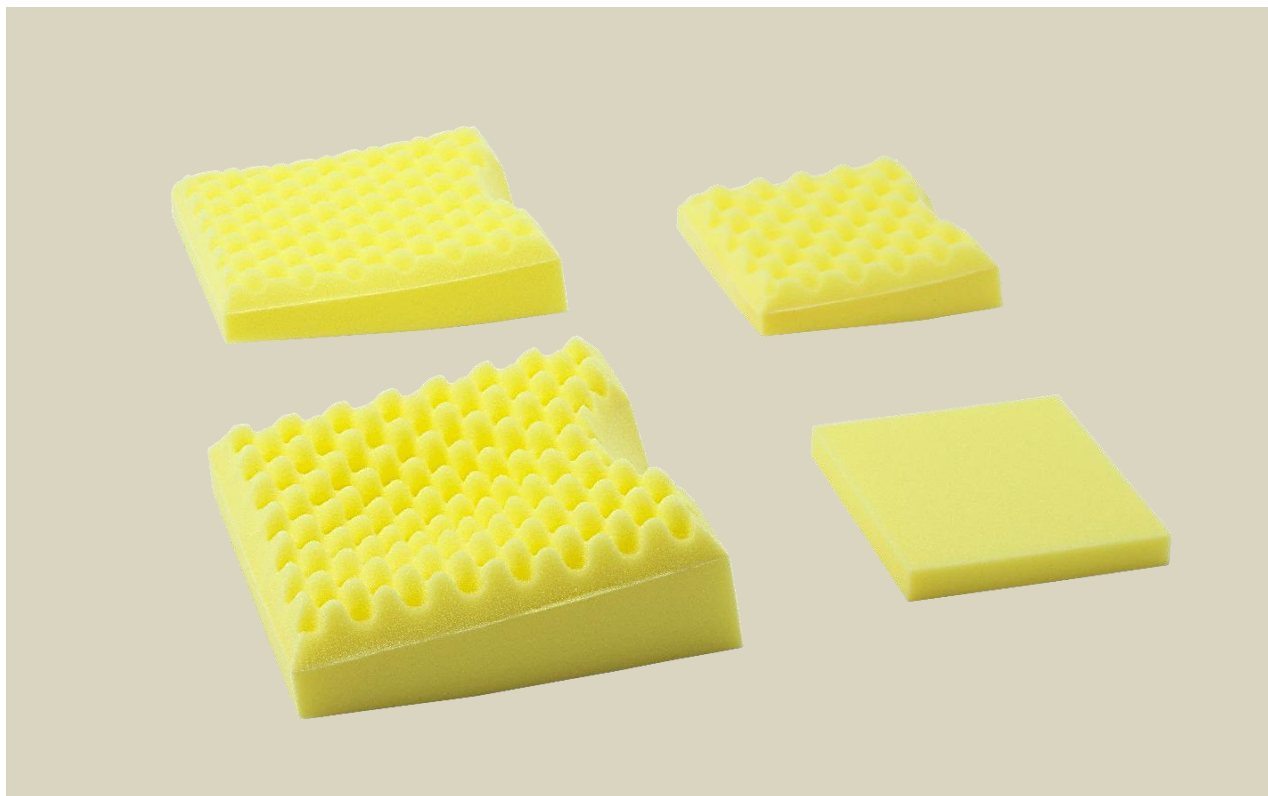

〔仰臥位用枕〕 アネスピロ2

従来の枕は円筒形、角形、ドーナツ型等の種類があります。
しかし、これらは枕と頭部の接触部が一点に集中するため脱毛等の原因になると言われています。
アネスピロ2は接触面の形状、材質を改良し、後頭部の圧力が分散するようデザインされています。

〔特徴〕

長時間の使用に最適。
後頭部の圧力が分散されるため、圧迫が少ない。
通気性がよい二層式発砲素材です。
小児用と大人用では凹凸の大きさが違います。
乳児用は高さ50mmと20mmのセットになります。
いずれも5個入り1箱です。

〔使用上の注意〕

本製品はディスプレイ商品です。
高温多湿な場所を避けて保管してください。
枕以外の目的に使用しないでください。
水洗いはしないでください。



※価格は2026年7月より適用

品番	品名	サイズ	JANコード	価格(税別)
4083	アネスピロ2 大人用	W230xD230xH90mm	4562127614134	¥21,000-(5個/1箱)
4084	アネスピロ2 小児用	W200xD210xH50mm	4562127614141	¥21,000-(5個/1箱)
4086	アネスピロ2 乳児用	W150xD160xH50mm 高さ調節マットW150xD160xH20mm	4562127614158	¥21,000-(5個/1箱)

[仰臥位・側臥位用枕]

シフォン 円座型枕

[特徴]

表面をエンボス加工した円座枕。
固い層と柔らかい層の二段構造。
側臥位と仰臥位で使用出来ます。
5個入り1箱です。
大人用と小児用、乳児用の3種類。
ディスプレイ製品



[仰臥位・側臥位用枕]

シフォン 円柱型

[特徴]

シフォンの円柱型仕様。
シフォンよりも高さがある仕様です。
硬い層と柔らかい層の2層構造。
5個入り1箱です。
大人用のワンサイズ。
ディスプレイ商品

Coming Soon



2026年7月より発売予定

ピロカバー

[特徴]

撥水コーティング付きの枕カバーです。
弊社以外の枕にも適合するサイズです。



※価格は2026年7月より適用

品番	品名	サイズ	JANコード	価格(税別)
4089	シフォン	W265xD265xH55mm	4562127614172	¥22,000-(5個/1箱)
4346	シフォン 小児用	W190xD190xH45mm	—	¥22,000-(5個/1箱)
4357	シフォン 乳児用	W120xD120xH25mm	—	¥16,000-(5個/1箱)
	シフォン円柱型	W240xD240xH80mm	—	
1914	ピロカバー コーティングあり	W400xD640mm (内寸W375xD355mm)	4562127611256	¥42,000-(200枚/1箱)

〔腹臥位用枕〕

アネプロン

〔特徴〕

患者接触面は顔面にフィットするよう凹状に加工されています。
本体上部は柔らかいウレタンフォーム、底部に固いウレタンフォームを採用し、沈み込みを防止。
眼および鼻部はT字にくりぬいてあり、圧迫を排除しています。
気管チューブの取り回しに便利な溝がついています。
2個入り1箱、デスポ製品です。



〔腹臥位用枕〕

アネプロン 小児用

〔特徴〕

アネプロンの小児用。
硬さの異なる2層を組み合わせた2層構造。
素材：ポリウレタン
5個入り1箱、デスポ製品です。



〔腹臥位用枕〕

アネプロン 低反発型

〔特徴〕

表面に低反発型のウレタン素材を取付し既製品よりも、除圧効果に優れた枕。
硬さの異なる3層を組み合わせた3層構造。
素材：ポリウレタン
5個入り1箱、デスポ製品です。





アネプロン用 鏡付き台座

天面にアネプロンを置き使用します。
OP中の眼、挿管チューブの確認に使えます。

[特徴]

ステンレス製の鏡(鏡面仕上げ)は交換可能です。
底面には滑り止めゴムマット付き。

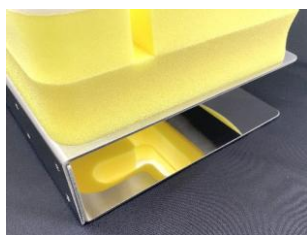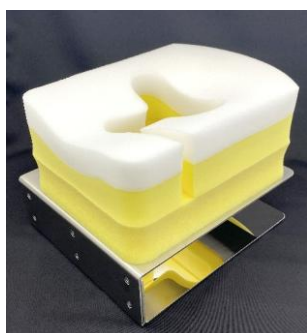

※価格は2026年7月より適用

品番	品 名	サイズ	JANコード	価格(税別)
4088	アネプロン	W200xD275xH120mm	4562127614165	¥10,000-(2個/1箱)
4309	アネプロン 小児用	W200xD220xH80mm	—	¥28,500-(5個/1箱)
4307	アネプロン 低反発型	W200xD275xH120mm	—	¥30,000-(5個/1箱)
4308	アネプロン 低反発型 小児用	W200xD220xH80mm	—	¥29,000-(5個/1箱)
	アネプロン鏡付き台座			¥60,000-


[側臥位用枕]

低反発仕様 SASUKE

[特徴]

顔の当たる面は低反発の素材を使用し、患者へのダメージを軽減します。
中心にある円柱部を取り外すことにより耳をかわして使用できます。
大人用・小児用の2種類、各2個入り1箱です。

※低反発素材の白色の部分は変色することがあります。
人体に影響は御座いませんが、直射日光を避けて頂き、なるべく早くご使用ください。

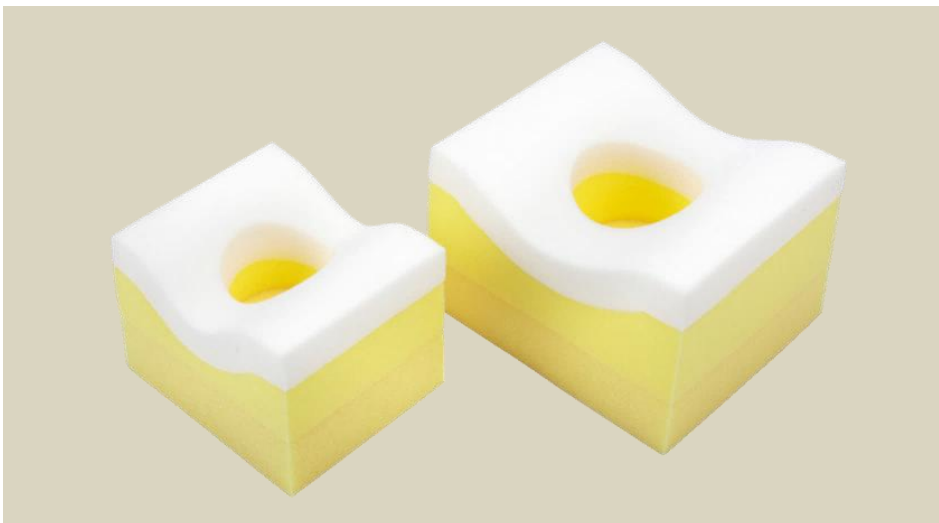

[仰臥位・側臥位用枕]

センシンピロ


[特徴]

円筒部を取り外すことにより側臥位にも最適です。
通気性の良い素材を使用、長時間の使用に最適です。
高さ50mmと25mmがセットになっています。
ラテックスフリーです。
5個入り1箱です。
ディスボ商品



※価格は2026年7月より適用

品番	品名	サイズ	JANコード	価格(税別)
4335	SASUKE 大人用	W230xD200xH150mm	—	¥18,000-(2個/1箱)
4336	SASUKE 小児用	W180xD150xH110mm	—	¥17,000-(2個/1箱)
4085	センシンピロ	W265xD260xH75mm	4562127610334	¥21,500-(5個/1箱)

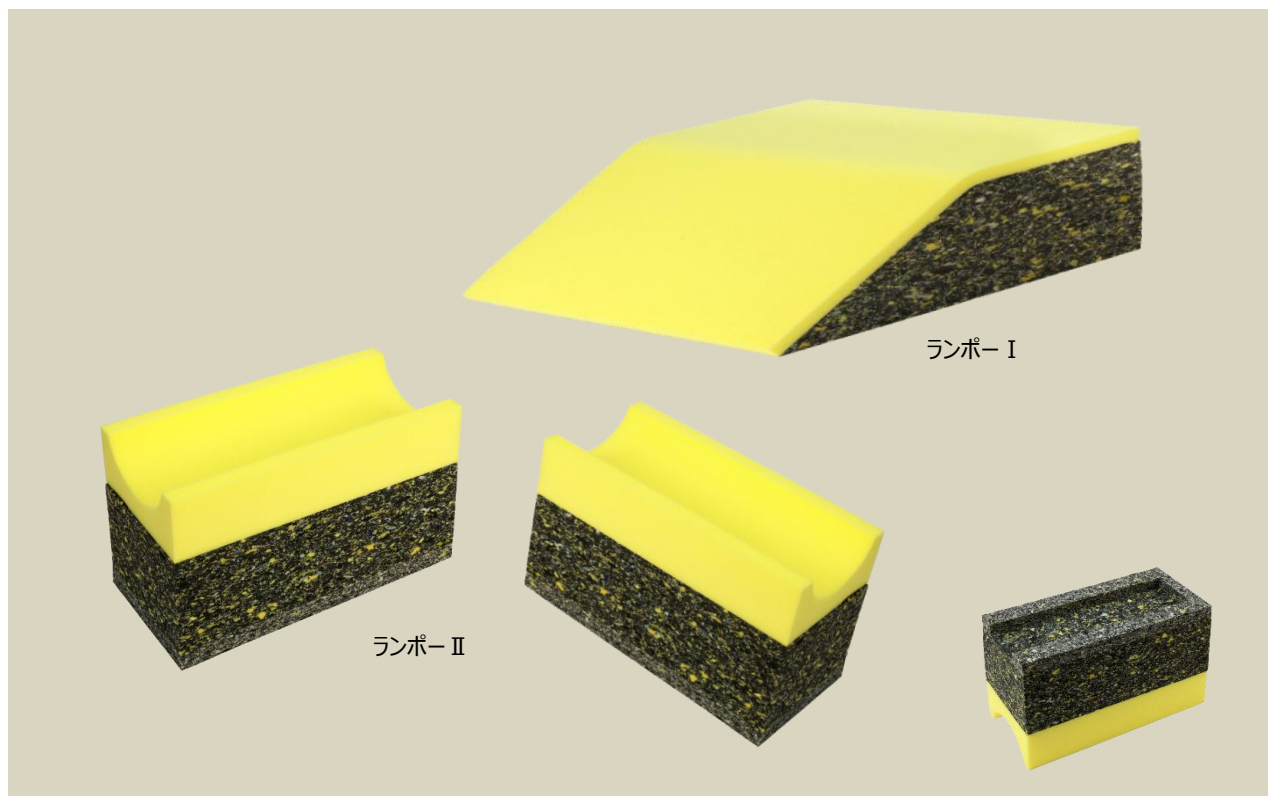


[Ramp体位用] ランポー

Ramp Position(傾斜体位)向けに使用する枕です。

患者の重みで沈まないように、下部(黒ポリウレタン部)は重さに耐える沈まない素材を使用しています。

患者に当たる上部(黄ポリウレタン部)は柔らかい素材を採用しており、通気性にも優れています。


腕用のランポー II は手台に差し込むことができ安定感があります。また、アネスピロ II 併用により頭部も安定します。

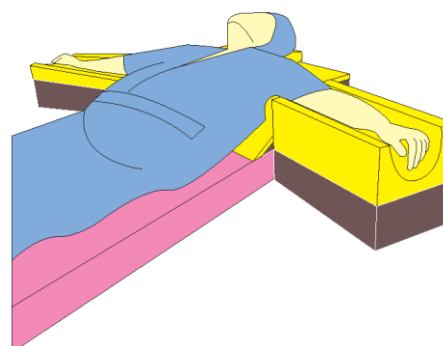

※価格は2026年7月より適用

品番	品名	サイズ	JANコード	価格(税別)
4361	ランポー I (上半身部)	W668xD500xH150mm (角度約20° 傾斜部438x平部230mm)	—	¥62,500-(1個)
4362	ランポー II (腕部)	W500xD240xH190mm (腕置き部 W500xD180xH60mm)	—	¥41,000-(2個)

[側臥位用腋窩枕] 腋窩まもロール

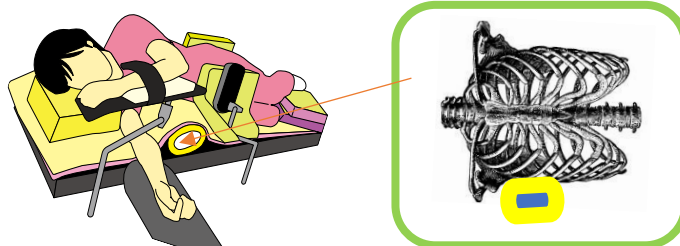

[なぜ腋窩枕を挿入するのか？]

側臥位は仰臥位と比較して、受圧面積が狭く重心が高いため、固定は不安定になりやすく、手術台や固定具との接触部位に体圧が集中しやすくなります。

また、下側になった腋窩を走行する動静脈や、腋窩を通して上腕外側へ走行する腋窩神経の圧迫を避けたり、肋間を広げるため、腋窩に枕を挿入する施設が多くあります。

しかしながら、固定性と体圧分散性に優れ、患者さんの体型に合った、硬さやサイズ・素材の枕を選択するのは難しい。

[製品の特徴]

枕の固定性を決める中央部分には固定性に優れたウレタンフォームを採用し、皮膚と接触する部分には体圧分散性や応力軽減性に優れた黄色いウレタンフォームを採用しました。

また、形状を楕円状にしたことで、皮膚に対する追従性が高まり、体位固定時の沈み込みや術中のローテーションによって生じる応力を軽減することが可能になりました。

[注意点]

枕には『上下』があります。上面が体表に接するように、枕を挿入してください。

継ぎ目が患者の身体に接触しないようにする。

腋窩神経・動静脈の圧迫を避け、腋窩から3～4横指あけた位置に枕を挿入すること。

患者さんの体格（上腕の太さ）に合った、腋窩枕を選択すること。

[開発にあたって]

腋窩枕には、患者の重みで潰れすぎて下側の上腕が過度に圧迫されないように、十分な高さで固定性が必要です。同時に、枕を挿入した側胸部に体圧が集中しないように、体圧分散性に優れている物である必要があります。また、体圧が集中しないように枕から角を無くし、ローテーション時に皮膚と追従するため楕円形のロール状にしました。

東海大学医学部附属八王子病院

副主任 手術看護認定看護師

周術期管理チーム認定看護師 小澤聡貴



品番	品名	サイズ	JANコード	価格(税別)
4332	まもロール Lサイズ	W170xD400xH105mm	—	¥23,500-(2個/1箱)
4334	まもロール Mサイズ	W140xD400xH105mm	—	¥23,500-(2個/1箱)


[容量可変式水枕] ウォーターピロ

[特徴]

- 手術中の皮膚、神経の圧迫の軽減
側臥位の際に下敷きとなる腋窩神経や動静脈の圧迫を和らげるのに役立ちます。圧力計が取付できるので圧力管理も可能です。
- 取り扱いが簡単
ガートル棒に吊り下げたバッグからの水の落差を利用して身体を浮上させます。逆にバッグを低くすることで水が抜けていきますので、従来の患者を持ちあげてクッション等を敷き込んだり、抜き取ったりする必要がありません。
- 水を入れるだけ
温水や保温庫を利用すると患者にバックの冷感を与えずに済みます。
- 高さを任意に変更
容量可変式なので体格に合わせられます。側臥位の際に胸部を挙上させて肋間開胸部の術野の確保にも有利です。
- ディスポーザブル製品(未滅菌)

[使用例]

- 側臥位で下敷きとなる腋窩神経、動静脈の圧迫をやわげるのに使用
脇、肋間にピロを敷きます。
対象：胸部外科、肺外科、整形外科他
- 咽頭、甲状腺手術で喉の部位を挙上するのに使用
背中、肩にピロを敷きます。
対象：外科、耳鼻咽喉科
- 側臥位で胸部肋間を開大させ術野を確保するのに使用
肋間にピロを敷きます。
対象：胸部外科、肺外科
- 腹臥位用枕と合わせて、顔面と胸の高さを調節するのに使用
腹臥位の胸部にピロを敷きます。
対象：外科、整形外科
- 心臓手術で胸部を挙上させ心臓、血管の視野を確保するのに使用
背部、背骨に合わせてピロを敷きます。
対象：胸部外科

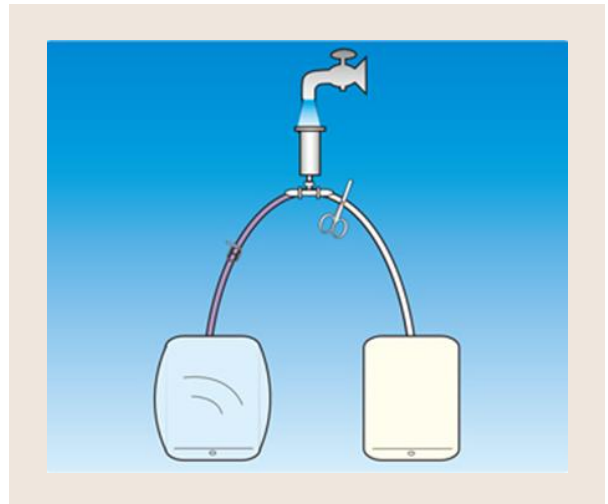

品番	品名	JANコード	価格(税別)
4602	ウォーターピロ	4562127614608	¥10,500-(1個/1箱)

神経ブロック用クッション

製品上部のくぼみに合わせて、患者さんの脚部を乗せて使用します。

本体内部は、土台部分に沈み込みの少ない素材を使用しておりその上に低反発の柔らかい素材を組み合わせた形となっております。

レザーカバー有りタイプでは清拭しやすい形となります。



座骨神経ブロック等の手技では、看護師さんが患者さんの脚部を長い時間支えて処置を行っている事があり、看護師さんの負担が大きい事が課題となっていました。また、麻酔科にとっては神経ブロック施行中のワーキングスペースを確保することが重要です。

負担の軽減と効率良い手技を施行することを目指して開発された「神経ブロック対応のクッション」となります。

札幌医科大学麻酔科学講座
教室長 立花 俊祐 先生 監修

品 名	仕様	サイズ	価格(税別)
神経ブロック用クッション	レザーカバー有り	W230×D200×H300mm	¥38,000-(1個)
神経ブロック用クッション	レザーカバー無し	W230×D200×H300mm	¥15,000-(1個)

[内視鏡検査・治療用枕]

エンドピロー



[特徴]

①検査・治療時の頭部安定性

医師・内視鏡検査技師からの発案により、後頭部側に固定部（コブ）をつけました。これにより、頭部が安定することで、左側臥位での検査・治療が安全・簡便に行えます。また3層構造の低反発素材を組み合わせることにより、患者様の頭部を優しく包み込み、検査・治療時の負担を軽減します。

②清拭可能

特殊なウレタンソフトコーティングにより、液体を弾くため衛生的に取り扱いが出来ます。アルコール清拭も可能です。

③ゆるやかな傾斜

口元側はゆるやかな傾斜をつけており唾液が内側に垂れ込むのを防ぎます。



国立がん研究センター中央病院内視鏡科 野中 哲 先生

検査・治療で用いる枕については関心が寄せられておらず枕の高さや幅・形状は、工夫が施されていないのが現状です。

特に上部消化管内視鏡検査・治療は左側臥位で行われるため、脊椎ができるだけ直線になる高さが適切であり、頭部の安定性がとても重要です。

ENDOPILOWは、内視鏡検査・治療に特化した他に類を見ない製品であり患者負担を軽減し、医療者にとって手技施行性を改善する大変有益な「枕」です。

今治まくら



[特徴]

①耳閉感が少ない

耳に当たる部分に穴が開いている為耳閉感が少ないです。

②誤飲制御

口元の傾斜により唾液がスムーズに流れ出ます。鎮静患者における誤飲予防効果があります。

③清拭可能

ディップコーティングによりアルコール清拭が可能です。



川崎医科大学総合医療センター 河本 博文 先生

内視鏡中、唾液が左の口角から出るのを患者が我慢して誤飲してしまうのを良く見かけます。これを防ぐことを考えて今治の町でデザインしました。

枕に傾斜をつけ左耳の耳閉感を通気口で少なくしました。そうすると自然に患者の顔が正面からやや左方向に顔が向くようになります。それにより唾液が左の口角からスムーズに流れ出ます。吸水紙や膿盆を口元近くに置くことで流れ出た唾液を受けることができます。

鎮静下の患者では吸引の回数が減る為看護師の負担軽減につながります。

品番	品名	材質	サイズ	価格(税別)
EP-101	エンドピロー	本体/ポリウレタン製 外装/ウレタンコーティング	W280×D250×H110mm	¥38,000(1個)
EP-201	今治まくら	塩ビウレタンフォーム ディップコーティング	W275×D150×H135mm	¥24,000(1個)



特注・カスタマイズ

特注関連商品

あなたのひらめき、お困りごとを製品化します

[受注生産品のメリット]

使用状況に合わせたサイズに変更できます。
ご自分の考えた形で製作することも可能です。
カタログに掲載の無いものでもご相談ください。



[注意点]

注文頂いてから作成に入りますので、納期は約1カ月程度掛かることがあります。
特注品の返却等是对应出来かねますのでご了承下さい。
保存状況にもよりますが、低反発素材が変色する恐れがございます。3カ月以内
にご使用いただくことを推奨します。
クラス分類のない特注品です。

陰圧式固定具

マジック・ベッド

製造販売届出番号:13B2X00361000MB1

診療、手術、救急搬送時に必要な体位はさまざま。
吸引することで任意の形状で固定し、安全で確実にサポートできます。
ロングセラーの陰圧式固定具を揃えています。

[特徴]

上半身の固定のとき、頭部の位置決めに便利な形状になっています。

[用途]

術中、術後の体位保持及び安静、矯正の必要な患者に最適です。



マジック・ギブス

製造販売届出番号:13B2X00361000GP1

[特徴]

下肢用【E-12】／上肢用【E-13】／頭頸部用【E-14】
3種類があり、それぞれ部位の固定に適した形状になっています。
ギブスシーネの代用に使えます。

[用途]

E-12:主に下肢の固定に適した形状になっていますがその他腰椎部、肋骨、頸椎部の固定にも使えます。

E-13:主に上肢の固定に適した形状になっていますが、その他小児の足関節、頸椎にも使えます。

E-14:主に頭部を含めた上半身の固定を目的とした形状になっていますがその他腰椎部または小児の全身の固定にも使えます。



E-12



E-13



E-14



品 名	型番	サイズ	付属品	JANコード	価格(税別)
マジック・ベッド	MB-1	720x920x45mm	吸引ノズル付ホース 綿カバー2枚	4562192059502	¥84,000-
マジック・ベッド	MB-1R	720x920x45mm	吸引ノズル付ホース	4562192059519	¥80,000-
マジック・ベッド ラージ	MB-L	900x1,000x45mm	吸引ノズル付ホース	4562192059526	¥98,000-
マジック・ギブス	E-12	470x900x35mm	吸引ノズル付ホース 綿カバー2枚、ベルト2本	4562192059533	¥67,000-
マジック・ギブス	E-13	280x530x23mm	吸引ノズル付ホース 綿カバー2枚、ベルト2本	4562192059540	¥56,000-
マジック・ギブス	E-14	700x880x45mm	吸引ノズル付ホース 綿カバー2枚、ベルト2本	4562192059557	¥88,000-



センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階
TEL : 03-5802-0560 FAX : 03-5802-0562