

中山式改良型吸引バッグ



品番	販売名	規格／型式	包装(数量)	届出番号
4600	中山式改良型吸引バッグ	A型(開胸用) 容量:800mL	20個/箱	11B1X00016000003
4601		B型(一般用) 容量:700mL		



品番	製品名	規格／型式	包装(数量)	
GDP-H-N	専用フック	取付可能パイプ 16～25φ	1個	医療機器非該当品



品番	販売名	規格／型式	包装(数量)	届出番号
0150200701	メラコネクター付接続管	6×8×1m	10本/箱	11B1X000160000002
0150202401		6×10×1m		
0150200801		8×8×1m		
0150200501		8×10×1m		

販売業者
 センシンメディカル株式会社

■お問い合わせ先:〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目7番16号
ブリ・テックビル6階 TEL 03-5802-0560

インターネットの情報もご覧ください <https://www.senshin-medical.co.jp/>

注意 ご使用前に必ず取扱説明書、電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●2026/6月 ●不許複製

製造販売業者
 MERA 泉工医科工業株式会社
製造業者
MERASENKO CORPORATION
メラセンコー コーポレーション 国名:フィリピン




中山式 改良型吸引バッグ

落差式ドレナージを、
シンプルに、観察しやすく。



- 胸部・腹部等の術後ドレナージに。使用前にウォーターシールを注水し、患者様より低い位置に設置して、閉鎖式ドレナージとして使用します。
- 軽量で柔軟なソフトバッグ型により、排液管理時の取り扱いやすさに配慮しています。

用途と接続スタイルで選べる、2つのドレナージバッグ。

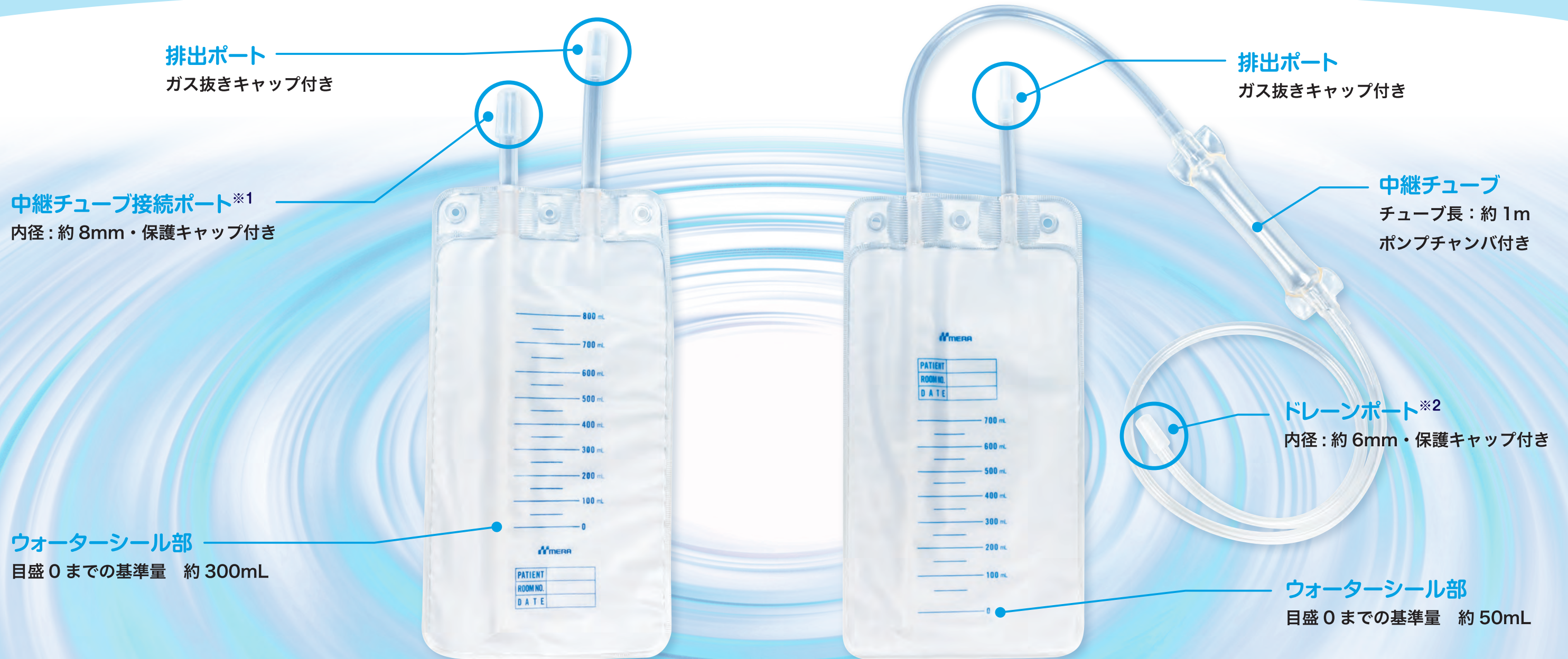

A型（開胸用・胸部ドレナージ用）

中継チューブを別途選択して使用するタイプです。
ドレーン刺入部の位置やバッグの設置位置に合わせて、接続ラインの長さ・取り回しを検討できます。

B型（一般用・腹部ドレナージ用）

ポンプチャンバ付き中継チューブを備えたタイプです。
チャンバを押す操作により、サイホンの原理を応用したドレナージを補助します。

※1 中継チューブは、接続ラインの環境に合わせて別途ご準備ください。

※2 患者ドレーンのサイズに合わせて接続コネクタを別途ご準備ください。